

BİYOVENT

Yoğun Bakım Tipi
Mekanik Ventilatör Cihazı



www.biosys.com.tr



GELECEĞİ İÇİNİZE ÇEKİN

BİYOVENT

Yoğun Bakım Tipi
Mekanik Ventilatör Cihazı





İŞİMİZ: HAYATIN KAYNAĞI

Sağlık için nefes, nefes için teknoloji üretiyoruz.

Biosys olarak Ankara'da çıktığımız bu yolda, 2012 yılından beri uzun yıllar AR-GE deneyimi olan yetkin mühendisler ve alanında uzman doktorlarla sağlık sektöründeki açılara yönelik çözümler sunuyoruz. Çalışma sürecimizde, sağlık hizmetlerinden faydalanmanın, en temel sosyal hak olduğunun ve bu hakkı, her bireye ulaştırabilmenin bilinciyle ilerliyor ve teknolojilerimizi, bu bilinçle geliştiriyoruz.

Yeni nesil medikal teknolojiler geliştirerek sağlık alanında hem ulusal hem de global ihtiyaçları karşılamak için AR-GE merkezimizde fikirlerimizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yaptığımız en ufak bir işin bile yeryüzünde bir bireyin sağlığını etkileyebileceğini biliyor, bunun için ürünlerimizdeki her bir detayın kusursuz bir şekilde tasarlanması için titiz ve derin çalışmalar yürütüyoruz. Etkin ve güvenli üretim anlayışımız sayesinde yüksek kalite ve güvenilirlik seviyesinde yeni nesil medikal teknolojiler üretiyor, sağlıklı yaşam için umut oluyoruz.

Sağlık sektörünün ihtiyaçları ve taleplerine yönelik geliştirdiğimiz teknolojilerde sadece mühendislik uzmanlığımıza güvenerek ilerlemiyor, attığımız her adımda doktorların görüşleriyle de şekillenen multidisipliner bir çalışma yürütüyoruz. Böylelikle hem teknolojik eşik değeri yüksek hem de ihtiyacı tam anlamıyla karşılayan, en iyi tasarım, yazılım ve teknoloji bütününe sahip tıbbi cihazlarla sağlık sektöründe fark yaratıyoruz. Bu farkımızla sınırları aşarak her bireyin sağlığına dokunmak ve Dünya'da sağlıklı yaşama açılan kapı olmak için emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz.

DETAYLI ARAřTIRMA, MÜKEMMEL SONUÇ

Yeni Nesil Teknoloji ile Yoğun Bakım Sistemlerinde Fark Yaratıyoruz.

Biosys olarak sağlık sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığımız arařtırmalar sonucu özellikle yoğun bakım sistemlerinde açıkların olduğunu ve bu açıkların hem sağlık çalışanlarını hem de hastaları doğrudan etkilediğini fark ettik. Bu farkındalık doğrultusunda uzman doktorların görüşleriyle ilerlettiğimiz 5 yıllık AR-GE çalışması sonucu, Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilator Cihazı'nı ortaya çıkardık.

T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Bilkent Üniversitesi Cyberpark destekleriyle geliřtirdiğimiz Biyovent ile yoğun bakım tipi mekanik ventilator cihazı üretiminde Türkiye'de bir ilke imza atarken üst düzey özellikleri sayesinde de Dünya sağlık sektöründe fark yaratıyoruz. Bu yeni nesil teknoloji ile kısa sürede büyük başarılarla imza atmamızın yanında Dünya'da pek çok bireyin sağlığına katkı sağlıyoruz.



5000+
cihaz

Dünya genelinde aktif olarak kullanılan binlerce cihazımızla pek çok insanın hayatına dokunuyor, sevdiklerinize umut oluyoruz.



25+
ülke

Covid 19 süreci gibi Dünya'nın zor zamanlarında tüm sağlık çalışanlarının ve hastaların yardımına kořmaya devam ediyoruz.



20
günden kısa
sürede teslimat

Zamanın sağlık için değerli olduğunu biliyor, yurtdışına cihaz gönderirken kurulumu hazır şekilde 20 günden kısa sürede teslim ediyoruz.



- **1500+ Adet Brezilya**
30 günden kısa bir sürede
kullanıma hazır teslimat

- **200+ Adet Romanya**

- **1500+ Adet Türkiye**

- **1500+ Adet Kazakistan**

- **100+ Adet Azerbaycan**



Sağlığa açılan kapı olma hedefimizde
sağlam adımlarla ilerliyoruz

BİYOVENT

Yoğun Bakım Tipi
Mekanik Ventilatör Cihazı

VENTİLATÖR TEKNOLOJİSİNDE BİR SONRAKİ ADIM



Teknolojik eřik deęeri yksek rnler sunma hedefiyle hayata geirilen Biyovent, yeni nesil teknolojesi ile ihtiyaları tam anlamıyla karřılar. Bu zamana kadar kullanılan solunum cihazlarının sunamadıęı ve doktorların taleplerini karřılayamadıęı tm aıkları kapatan zellikleri sayesinde hem teknoloji hem de saęlık aısından yksek kalite sunar.

Tasarımdan donanıma, yazılımdan teknolojiye her bir detayı inceliklerle dřnlen ve btnlk bir anlayıřla geliřtirilen Biyovent, modern ve ergonomik izgilere sahip tasarımı, kullanıcı dostu arayz, geleneksel ve yeniliki alıřma modları, farklı hasta gruplarına

uyarlanabilir yapısı ile saęlıęa deęer katar. Bu zamana kadar kullanılan solunum cihazlarında, hastanın ihtiyaına gre deęiřen paralarının fazla olması ve bu paraların, maliyet aısından olduka yksek olması, Biyovent ile minimize edilir. Solunum cihazlarında ekonomik ve teknik aıdan dezavantajlara sebep olan bu durum, ihtiyaa ynelik geliřen yeni nesil ventilatr teknolojisi ile artık bir dezavantaj olmaktan ıkmıřtır. Pek ok hasta ihtiyaını tek bařına karřılayabilmesi ve minimum seviyede ekstra paraya ihtiya duyması ile Biyovent, solunum cihazı teknolojisine yeniliki bir anlayıř katarken ekonomik yapısıyla da avantaj saęlar.

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ TANIMLAMA

Her Hastanın İhtiyacına Göre Etkin Tedavi

Her hastanın durumu ve ihtiyacı farklıdır. Bu farkındalık ile geliştirilen Biyovent, hasta ihtiyacına göre özelleştirilebilir yapı sunar. Böylelikle en etkin tedavinin uygulanması için hem hastaya hem de doktora avantaj sağlar.

Sağlık için her detayın düşünüldüğü Biyovent ile pediatrik ve yetişkin hastalarda kullanım esnasında hastaların boy, kilo gibi özellikleri girilerek, hastaya en uygun tedavi yönteminin uygulanmasına yardımcı olunur. Ayrıca fiziksel özellikler dışında hastanın durumu ile ilgili değerleri de kaydedilerek değişen

klินิก ihtiyaçlar takip edilebilir. Böylelikle her hastaya en uygun ve doğru tedavi uygulanabilmesi sağlanır.

Kullanım açısından Biyovent, sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan pek çok bilgiye ulaşmasına yardımcı olurken hastanın ihtiyacı olan tedavi yöntemini uygulamada, Non-İnvaziv, İnvaziv ventilasyon ve N-CPap, HFO terapi çeşitlerini seçebilme olanağı sağlar. Gelişmiş yazılım özellikleri ile tedavi için güvenli alt yapıyı kuran Biyovent, hortum ayarlarından hasta için kullanılacak hortum devresi uzunluğunu, kalınlığını seçebilme ve ayarlanabilen alarm limitleri özellikleri ile güvenliği üst düzeye çıkartır.



İnvaziv ve Non-İnvaziv Ventilasyon



Entegre Nebülizör



Yüksek Akış Oksijen Terapisi ve N-CPAP (nasal C-PAP)



Pediatric, Yetişkin ve Yenidoğan(Opsiyonel)
Hastalara Uygun



Akıllı Ventilasyon Modları



YENİLİKÇİ TASARIM, KAPSAMLI ÇÖZÜMLER

Hızlı ve Kolay Kurulumu Uygun Tasarım


Biyuvent, üç parçalı yapısıyla hızlı ve kolay bir şekilde kurulur. Ayak, destek ve ekranla bağlantılı ana gövde parçalarından oluşan ergonomik tasarımı sayesinde kurulum aşamasında kolaylık sağlar. Parçaların birbiri ile

bağlantısı sekiz vidayla gerçekleştirmeye imkan tanıyan Biyoment, cihaz kurulumu esnasında karmaşık bir yapılanmadan öte kolaylaştırılmış kurulum sistemi sayesinde hızlı bir şekilde çözüm odaklı çalışmaya yardımcı olur.



- 15 inç yüksek çözünürlüklü renkli ekran
- Hassas dokunmatik
- Modlar arası kolay geçiş
- Kolay ayarlanabilir mod parametreleri
- 30'dan fazla parametreyi eş zamanlı izleme imkanı

- Nemlendirici için güç kaynağı
- Harici nebülizör girişi (USB)
- Acil durum valfi

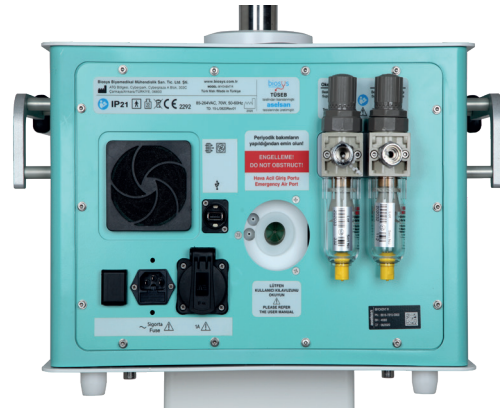

- Çok kullanımlı otoklavlanabilir ekspirasyon bloğu
- Nebülizör çıkışı



- Darbe emilimi arttırılmış tekerlekler
- Kilit mekanizması
- Güvenli tasarım
- Kolay kullanım




GELİŞMİŞ YAZILIM, KOLAY KULLANIM

Kullanımı kolay arayüz tasarımı ile hasta bilgileri kolaylıkla girilir ve parametreleri hastaya uygun şekilde özelleştirme olanağı sağlar.



Ekran üzerinden yönlendirmeler ile 3 adımda kolay kalibrasyon yapılmasına olanak verir.

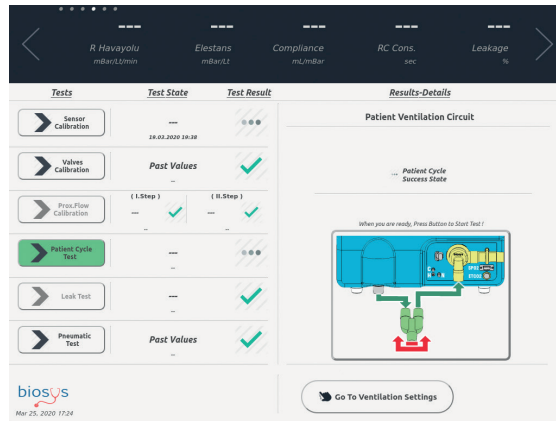

Kullanıcı Odaklı Ekran Sistemi

Gelişmiş yazılım özelliklerine ve kullanıcı odaklı arayüz tasarımına sahip olan Biyovent eş zamanlı olarak 3 grafik, 3 döngü ve akciğer dinamik durumunu gösterir. Bilgilere erişimde kullanılan görsel destekli arayüz tasarımı sayesinde öğrenme ve uygulamada kolaylık sağlayarak aynı ekran üzerinden 30'dan fazla parametreye ulaşabilmesini sağlar. 15 inç yüksek çözünürlüğü ile de sistemde yer alan bilgileri, net ve ayrıntılı bir şekilde gösterir.

Hassas dokunmatik özelliğine sahip olan ekran üzerinden ayarlamalar kolaylıkla yapılır, hastaya uygun tedavide gerekli düzenlemeler için hızlı adımlar atılması sağlanır. Hastayla ilgili ani gelişen durumlar için anlık ölçüm değerlerini grafiksel biçimde göstererek takip edilebilmesinin yanı sıra alarm durumlarında uyarı vererek hızlı müdahale alınmasına yardımcı olur. Ayrıca akıllı solunum izleme özelliği sunan akciğer diyagramı ile akciğerin dinamik durumunu görmeyi sağlar.




Akıllı solunum izleme özelliği sunan akciğer diyagramı ile akciğerin dinamik durumunu görmeyi sağlar.



Monitörizasyon parametrelerine tek ekran üzerinden ulaşarak 30'dan fazla parametrenin aynı anda izlenmesine olanak tanır.

HER HASTAYA UYGUN ÇÖZÜM

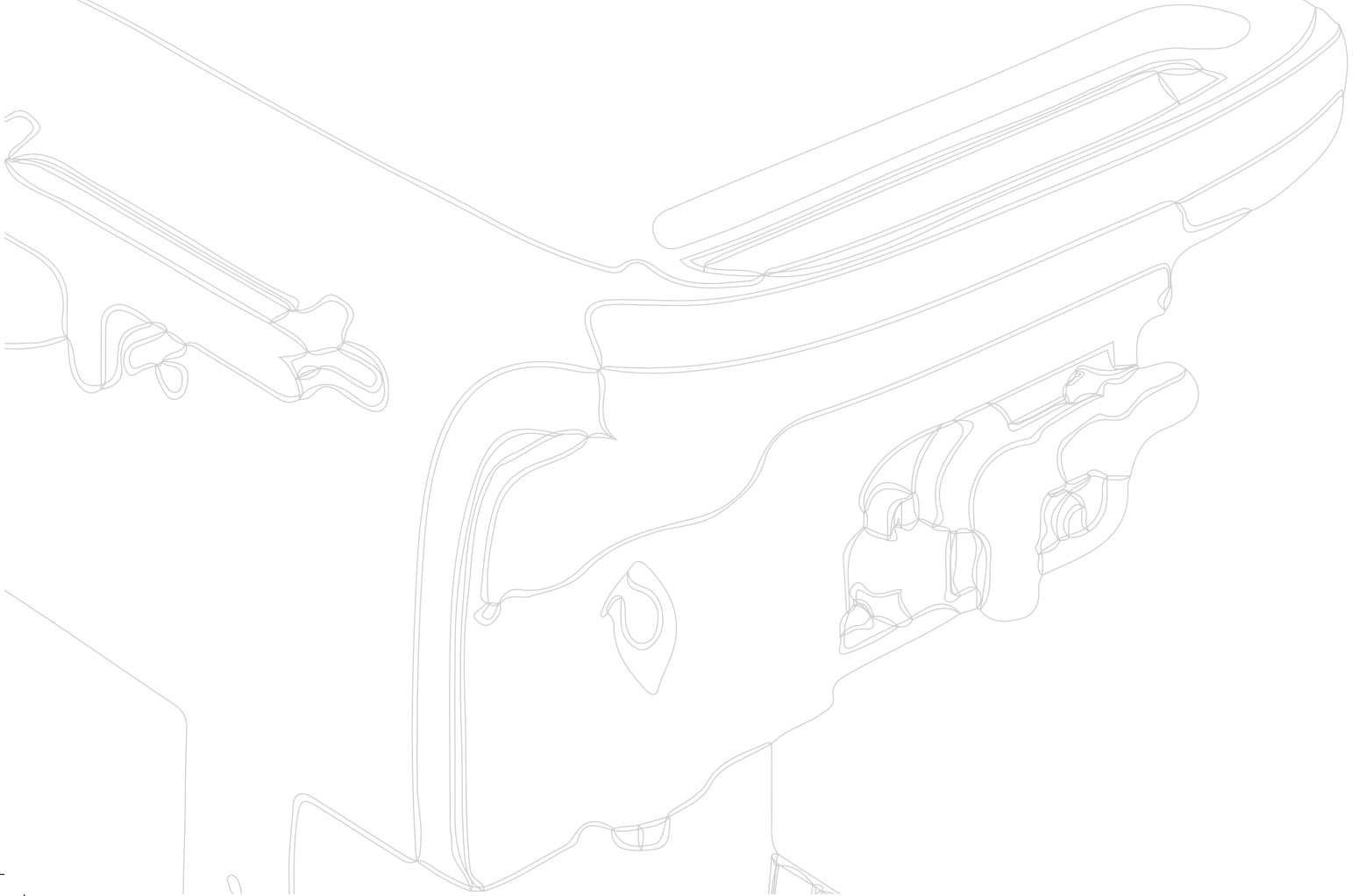



Her Yaşı ve Duruma Uygun Ventilasyon Modları

- Basınç Hedefli Modlar (P-ACV P-SIMV+PS P-CMV P-PSV P-Bilevel APRV)
- Hacim Hedefli Modlar (V-ACV V-ACV(PRVC) V-CMV V-SIMV+PS V-SIMV(PRVC)+PS)
- Spontan Modlar (SPN-PS SPN-VS)
- Akıllı Modlar [SAV(WOB Optimizasyonu)]



BIYOVENT

Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör Cihazı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Basınç Hedefli Modlar	Monitörizasyon Parametreleri	
P-ACV	Ptepe (cmH2O)	Kompliyans (mL/cmH2O)
P-SIMV+PS	Peep (cmH2O)	RC Sabiti (sn)
P-CMV	Dakika Hacim (Lt/dk)	Kaçak(%)
P-PSV	Tidal Hacim (ml)	WOB (joule)
P-Bilevel	Soluk Sayısı (SS/dk)	WOB/Lt (joule/Lt)
APRV	Pplato (cmH2O)	Vresidual (mL)
Hacim Hedefli Modlar	Port (cmH2O)	Vekspirasyon (mL)
V-ACV	I:E Oranı	Vinspirasyon (mL)
V-ACV(PRVC)	Ti (sn)	OtoPEEP (cmH2O)
V-CMV	Te(sn)	PO.1 (cmH2O/ 0.1s)
V-SIMV+PS	İnspirasyon Tepe Akış (Lt/dk)	RSBI (ss/dk)Lt
V-SIMV(PRVC)+P	Ekspirasyon Tepe Akış (Lt/dk)	PTP (cmH2OXsec)
Spontan Modlar	Oksijen (%)	P_nif (cmH2O)
SPN-PS	Dakika Hacim (Spn) (Lt/dk)	Ekspirasyon Hacim/dk (Lt/dk)
SPN-VS	Soluk S(Spon) (SS/dk)	Kaçak Sabiti (Ltr/m)/cmH2O)
Opsiyonel Özellikler	R Havayolu (cmH2O/ Ltr/sec)	Anlık Tidal Hacim (mL)
Yeni doğan hastalarda kullanım	Elestans (cmH2O/Ltr) Elestans (cmH2O/Ltr)	rcExp (sn)
SAV (WOB Optimizasyonu)		

Hasta Uyumluluđu ve Performans Uyumu Çocuk, Pediatrik
Soluk Sayısı: 1-150/dakika
T inspirasyon: 0.1-10 saniye
Tidal Hacim: 0.02-0.3 Litre
Akış: 1-60 Litre/Dakika
Yetişkin
Soluk Sayısı: 1-100/dakika
T inspirasyon: 0.1-10 saniye
Tidal Hacim: 0.1-3 Litre
Akış: 2-120 Litre/Dakika

Çalışma Özellikleri
İnspirasyon Basıncı: 2-100 mBar
İnspirasyon süresi: 0.1-10 Sn
Peep Basıncı: 0-50 mBar
Soluk Hızı: (ç) 1-150/dk (y) 1-100/dk
Akış: (ç) 1-60 lt/dk (y) 2-120 lt/dk
O2 Karışımı: 21-100%
Spontan Basınç Desteđi: 0-100 mBar
I/E Oranı: 1:10 (x60*)-10:1 (ç): Çocuk, (y): Yetişkin

Basınç Kaynađı Özellikleri
O2 Basıncı: 2.5 - 7 Bar Merkezi Sistem/Tüp
Hava Basıncı: 2.5 - 7 Bar Merkezi Sistem/Tüp
Kaynak bitiminde otomatik deđiştirme ve alarm gösterimi
Medikal kompresör / Regülatör ile Çalışabilme
Elektriksel Özellikler
Batarya Süresi: 2 saat + 8 saat (Opsiyonel)
Şebeke Voltajı: 180 - 264 VAC
Güç Tüketimi: 47 - 63 Hz 100W
Boyut ve Ağırlık
B: 150 cm / D: 58 cm / G: 58 cm
Ağırlık: 55 Kg
Ekran Hareketi: Sağa veya sola 150° Yukarı ve aşağı 15°
Ekran: Tam dokunmatik

Dijital Arayüzler
USB: 4 adet / COM: 2 adet
HDMI: 1 adet / LAN: 2 adet
Display Port: 1 adet
Mic. In: 1 adet



BİYOVENT

Yoğun Bakım Tipi
Mekanik Ventilator Cihazı

Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı No: 23/C
ODTÜ Teknokent 06800 Çankaya/ANKARA

0850 800 62 97

www.biosys.com.tr



Tüm hakları saklıdır. Teknik özellikler yalnızca Biosys Biyomedikal Mühendislik Ltd. Şti. tarafından değiştirilebilir.